

Московский физико-технический институт
(государственный университет)
Факультет общей и прикладной физики

Лабораторная работа № 4.5.2
(Общая физика: оптика)

Интерференция лазерного излучения

Работу выполнил:
Иванов Кирилл, 625 группа

г. Долгопрудный
2018 год

Цель работы: исследование видности интерференционной картины излучения гелий-неонового лазера и определение длины когерентности излучения.

Оборудование: He – Ne-лазер, интерферометр Майкельсона с подвижным зеркалом, фотодиод с усилителем, осциллограф, поляроид, линейка.

1. Теоретическое введение

Важный параметр интерференционной картины — ее видимость:

$$V = \frac{I_{max} - I_{min}}{I_{max} + I_{min}} \quad (1)$$

Удобно представлять видимость в виде произведения функций различных параметров установки/системы:


$$V = V_1 V_2 V_3 \quad (2)$$

Рассмотрим эти функции подробнее. Первая из них отвечает за отношение интенсивностей интерферирующих волн:

$$V_1 = \frac{2\sqrt{\delta}}{1 + \delta}, \quad \delta = \frac{B_m^2}{A_m^2} \quad (3)$$

Здесь A_m, B_m — амплитуды волн. Вторая функция учитывает влияние разности хода и спектрального состава волн:

$$\gamma_2 = \frac{\sum_n A_n^2 \cos \frac{2\pi \Delta \nu n l}{c}}{\sum_n A_n^2} \sim e^{-(\pi \Delta F l / c^2)}$$

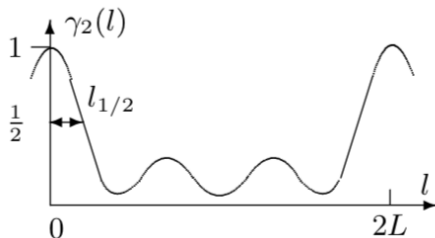

Здесь l — разность хода, $\Delta \nu$ — спектральный состав излучения, A_n^2 — интенсивность мод. Оценка приведена из перехода к непрерывному пределу. На графике (рис.1) показан вид $V_2(l)$, позволяющий получить расстояние L между зеркалами резонатора и межмодовое расстояние $\Delta \nu$. Величина $l_{1/2}$ позволяет оценить диапазон частот ΔF . Формулы связи межмодового расстояния и длины L , а также $l_{1/2}$ и ΔF таковы:

Рис. 1: Качественный график V_2

$$\Delta \nu = \frac{c}{2L}, \quad l_{1/2} \approx \frac{0,26c}{\Delta F} \quad (4)$$

Последняя функция — зависимость от угла поляризации α :

$$V_3 = |\cos \alpha|$$

2. Экспериментальная установка

2.1 Описание установки

Для получения интерференционной картины используется интерферометр Майкельсона, смонтированный на вертикально стоящей массивной металлической плите. Схема установки приведена на рисунке.

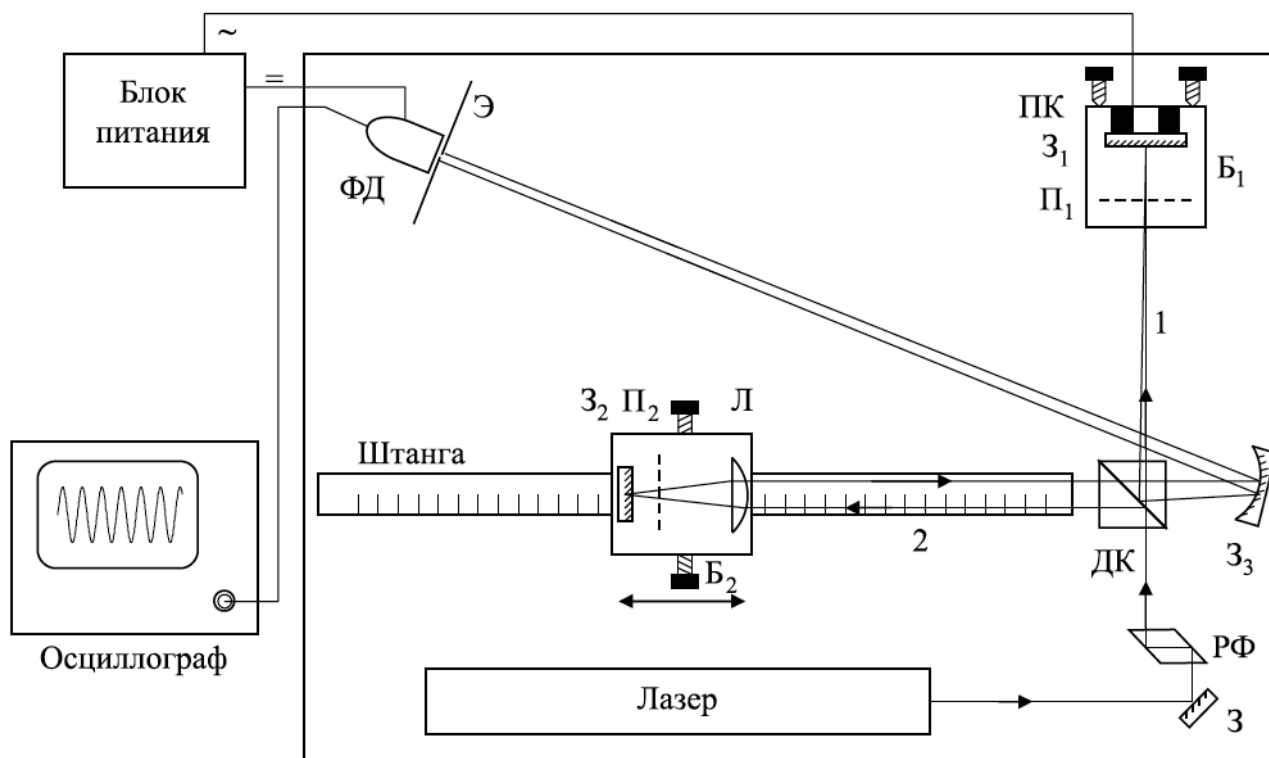


Схема установки. З, З₁, З₂, З₃ — зеркала. П₁ и П₂ — поляризаторы. Б₁ и Б₂ — блоки № 1 и 2. ДК — делительный кубик, РФ — ромб Френеля. ФД — фотодиод, Э — экран, ПК — пьезокерамика, Л — линза

Источником света служит гелий-неоновый лазер (средняя длина волны $\lambda_0 = 632,8$ нм). Пучок лазерного излучения отражается от зеркала З и проходит призму полного внутреннего отражения РФ (ромб Френеля), которая превращает линейную поляризацию излучения в круговую. Если в установке используется лазер, излучающий неполяризованный свет, то ромб Френеля не нужен, но он и не мешает выполнению работы. Далее лазерное излучение делится диагональной плоскостью делительного кубика ДК на два пучка.

Пучок 1 проходит поляризатор П₁, отражается под небольшим углом от зеркала З₁, снова проходит поляризатор П₁ и, частично отражаясь от диагональной плоскости делительного кубика, выходит из интерферометра, попадает на зеркало З₃ и далее на фотодиод ФД. Зеркало З₁ наклеено на пьезокерамику ПК, которая может осуществлять малые колебания зеркала вдоль направления распространения падающего пучка. Поляризатор и зеркало с пьезокерамикой собраны в единый блок Б₁, который крепится к вертикально стоящей плите. В блоке Б₁ имеются юстировочные винты, которые позволяют регулировать угол наклона зеркала З₁. В установке

предусмотрена возможность вращения поляроида Π_1 . Угол поворота отсчитывается по шкале, нанесённой на оправу поляроида. Пучок 2 проходит линзу L , поляроид Π_2 , отражается от зеркала Z_2 , снова проходит поляроид Π_2 , линзу L и делительный кубик, выходит из интерферометра, попадает на зеркало Z_3 и далее на фотодиод ФД. Таким образом, от зеркала Z_3 под небольшим углом друг к другу идут на фотодиод два пучка, прошедшие разные плечи интерферометра. Между ними происходит интерференция и образуются интерференционные полосы. Линза L , поляроид Π_2 и зеркало Z_2 собраны в единый блок B_2 .

Зеркало Z_2 установлено в фокальной плоскости линзы L . Это сделано для того, чтобы падающий и выходящий из блока B_2 пучки всегда были параллельны друг другу. Блок B_2 может перемещаться вдоль пучка 2 по штанге, жёстко связанной с плитой интерферометра. Длина штанги 90 см. В установке предусмотрена возможность небольшого поперечного перемещения блока B_2 , что позволяет регулировать расстояние между падающим и выходящим из блока пучками. При измерениях блок B_2 крепится к штанге при помощи двух винтов. Вдоль штанги нанесены деления через один сантиметр. При перемещении блока B_2 вдоль штанги на величину x_1 геометрическая разность хода между пучками 1 и 2 изменяется на величину $l = 2x_1$.

Сферическое зеркало Z_3 с небольшим фокусным расстоянием увеличивает картину интерференционных полос и позволяет наблюдать её на экране \mathcal{E} , расположенном в плоскости входного окна фотодиода. Свет попадает на фотодиод ФД через узкую щель в центре экрана. Щель ориентируется параллельно интерференционным полосам. Ширина щели меньше расстояния между полосами. Сигнал фотодиода усиливается и подаётся на вход осциллографа. Для питания усилителя сигнала фотодиода и управления пьезокерамикой используется блок питания БП.

На пьезокерамику подаётся напряжение с частотой 50 Гц. При этом её длина изменяется с частотой 100 Гц. Величина удлинения зависит от приложенного напряжения и регулируется ручкой «Качание» на блоке питания. Обычно удлинение составляет несколько длин волн света. На эту величину перемещается вдоль пучка 1 зеркало Z_1 . Интерференционная картина смещается на ширину полосы (одно колебание на экране осциллографа), если зеркало Z_1 смещается на $\lambda_0/2 \sim 0,3$ мкм. При измерениях через входную щель фотодиода последовательно проходит несколько полос интерференционной картины, а на экране осциллографа наблюдаются колебания с изменяющимся периодом.

2.2 Методика измерения

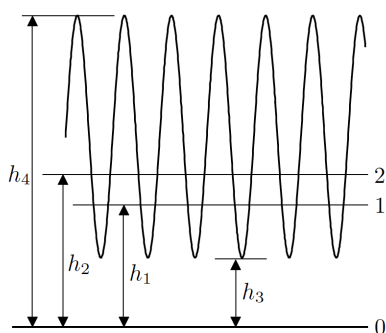


Рис. 2: Сигнал фотодиода на осциллографе

Осциллограф мы используем для нахождения следующих величин: фоновой засветки (линия 0 — перекрыты оба пучка 1 и 2); интенсивность света каждого из пучков (линии 1 или 2 — перекрыт пучок 2 или 1); максимума и минимума интенсивности интерференционной картины (открыты оба пучка). При этом параметр δ из (3), определяется отношением

$$\delta = \frac{h_1}{h_2}$$

Понятно, что из физического смысла, наша видимость рассчитывается очевидным образом, согласно формуле (1), так:

$$V = \frac{h_4 - h_3}{h_4 + h_3} \quad (5)$$

Отсюда, используя (2), мы можем получить наши функции из (5), фиксируя одну из них (т.е. беря равной единице). Так, при $\alpha = 0 \Rightarrow V_3 = 1$,

$$V_2(l) = \frac{V}{V_1} = \frac{h_4 - h_3}{h_4 + h_3} \cdot \frac{h_2}{h_1} \quad (6)$$

А приняв разность хода $l = 0 \Rightarrow V_2 = 0$, можно найти

$$V_3(\alpha) = \frac{V}{V_1} = \frac{h_4 - h_3}{h_4 + h_3} \cdot \frac{h_2}{h_1} \quad (7)$$

3. Ход работы

3.1 Изучение поляризации

Поворотами поляризатора Π_1 убедимся, что свет от лазера — поляризованный. Настроив поляроид на минимальную видимость и введя дополнительный поляроид, мы вновь получаем интерференционную картину при его поворотах. Так как картина изменится, получаем, что **поляризация — линейная или круговая**, а не хаотическая.

Таблица 1: Измерение зависимости видности от угла

α	h_4	h_3	h_2	h_1	V	δ	V_1	V_3
90	30	24	25	1	0.11	25	0.38	0.29
80	30	24	25	2	0.11	12.5	0.52	0.21
75	31	25	24	3	0.11	8	0.63	0.17
65	36	26	24	6	0.16	4	0.8	0.2
55	42	27	24	10	0.22	2.4	0.91	0.24
45	47	26	24	12	0.29	2	0.94	0.31
35	58	28	24	19	0.35	1.3	0.99	0.35
25	59	34	24	18	0.27	1.3	0.99	0.4
15	64	33	24	20	0.32	1.2	1	0.46
5	66	20	24	20	0.53	1.2	1	0.54

3.2 Измерение зависимости видности от угла

Исследуем зависимость видности интерференционной картины от угла α поворота поляроида Π_1 при нулевой разности хода ($V_2 = 1$). Для этого измерим величины h_1, h_2, h_3 и h_4 на экране осциллографа. Результаты занесем в таблицу и построим график согласно формуле (7). Значения для δ, V, V_1 получим из формул выше.

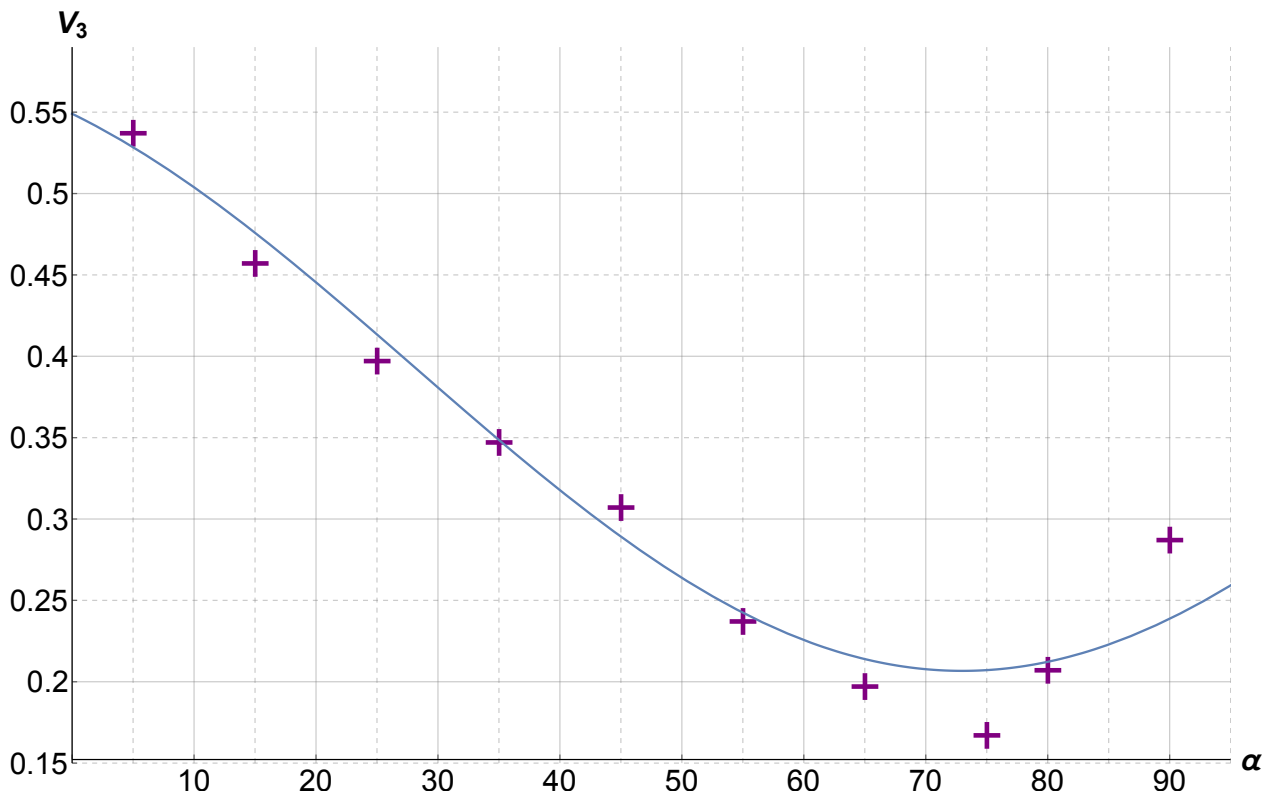


Рис. 3: Измерение зависимости видности V_3 от угла полярзации α

Из графика видно, что он приближается функцией $\cos^2 \alpha$. Это значит, что **поляризация — круговая**.


3.3 Измерение зависимости видности от дальности хода

Теперь установим α на максимальную видность и будем перемещать блок B_2 , тем самым изменяя дальность хода x . Аналогично предыдущему пункту измерим величины h_1, h_2, h_3 и h_4 на экране осциллографа. Результаты занесем в таблицу и построим график согласно формуле (6). Значения для δ, V, V_1 получим из формул выше.

Видно, что у нас наблюдается 2 максимума по краям области измерения и некоторые колебания в промежуточной области. А именно, максимумы в области $x_1 \approx (10 \pm 2)$ см и в области $x_2 \approx (75 \pm 2)$ см, откуда получаем следующий результат:

$$L = \frac{1}{2}(x_2 - x_1) = (32,5 \pm 1,4) \text{ см}$$

Отсюда нетрудно получить и значение $\Delta\nu$ из формулы (4):

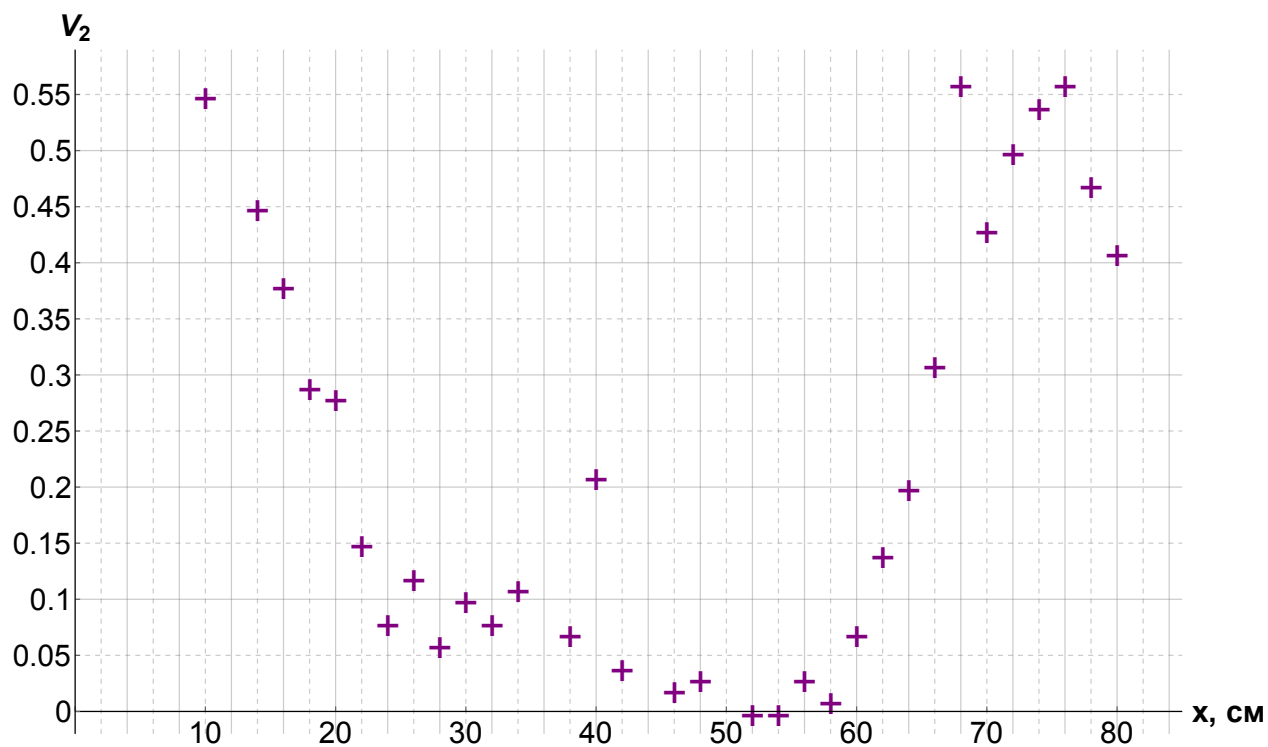Рис. 4: Измерение зависимости видности V_2 от дальности хода x

$$\Delta\nu = \frac{c}{2L} \approx (4,6 \pm 0,2) \cdot 10^8 \text{ Гц}$$

Оценим $l_{1/2} \approx 18 - 10 = 8 \pm 2$, откуда по формуле (4) получаем

$$2\Delta F = 2 \cdot \frac{0,26c}{l_{1/2}} \approx (0,195 \pm 0,49) \cdot 10^8 \text{ Гц}$$

Тогда для числа одновременно генерируемых лазером продольных волн можно провести оценку:

$$N \approx 1 + \frac{2\Delta F}{\Delta\nu} \approx 25 \pm 6$$

Таблица 2: Измерение зависимости видности от угла

α	h_4	h_3	h_2	h_1	V	δ	V_1	V_2
10	69	20	20	24	0.55	1.2	1	0.55
14	49	28	20	12	0.27	0.6	0.97	0.28
16	62	28	20	24	0.38	1.2	1	0.38
18	76	42	24	36	0.29	1.5	0.98	0.29
20	69	39	24	35	0.28	1.5	0.98	0.28
22	55	42	14	35	0.13	2.5	0.9	0.15
24	45	39	13	30	0.07	2.3	0.92	0.08
26	46	38	8	33	0.1	4.1	0.79	0.12
28	40	36	8	30	0.05	3.8	0.82	0.06
30	32	39	17	23	-0.1	1.4	0.99	0.1
32	30	26	7	22	0.07	3.1	0.86	0.08
34	31	26	7	32	0.09	4.6	0.77	0.11
36	40	26	7	31	0.21	4.4	0.78	0.27
38	40	36	7	30	0.05	4.3	0.78	0.07
40	44	32	7	33	0.16	4.7	0.76	0.21
42	37	35	7	38	0.03	5.4	0.72	0.04
44	49	33	7	40	0.2	5.7	0.71	0.27
46	43	44	7	34	-0.01	4.9	0.75	0.02
48	36	38	7	28	-0.03	4	0.8	0.03
50	56	34	7	48	0.24	6.9	0.67	0.37
52	52	52	7	44	0	6.3	0.69	0
54	48	48	7	39	0	5.6	0.72	0
56	46	44	7	38	0.02	5.4	0.72	0.03
58	50	49	7	43	0.01	6.1	0.69	0.01
60	58	51	19	37	0.06	1.9	0.95	0.07
62	45	34	18	22	0.14	1.2	0.99	0.14
64	31	21	16	8	0.19	0.5	0.94	0.2
66	62	34	16	32	0.29	2	0.94	0.31
68	37	14	16	4	0.45	4	0.8	0.56
70	60	24	16	20	0.43	1.3	0.99	0.43
72	56	19	16	22	0.49	1.4	0.99	0.5
74	43	14	10	19	0.51	1.9	0.95	0.54
76	56	16	20	18	0.56	0.9	1	0.56
78	52	19	21	14	0.46	0.7	0.98	0.47
80	41	18	20	10	0.39	0.5	0.94	0.41